



**MEZONICA**  
Электрический массажер  
для кожи головы  
ТЕРМОКОМПРЕСС

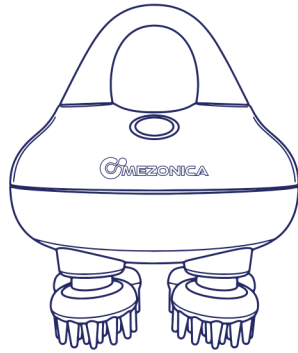

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


**КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

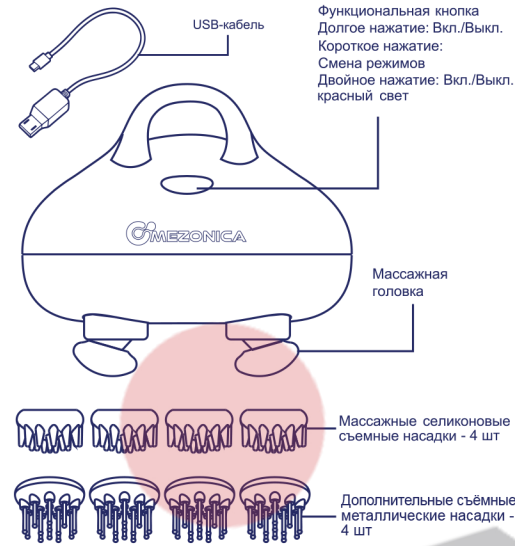

**ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Включение**  
Удерживайте функциональную кнопку 2 секунды, чтобы включить или выключить устройство.
  - Выбор режима**  
После переключения включения кратко нажимайте на функциональную кнопку для режимов массажа: медленный, быстрый, автоматическое чередование быстрого и медленного режимов.
- Режимы массажа:
- Режим 1: медленный (фиолетовый цвет кнопки включения)
  - Режим 2: быстрый (синий цвет кнопки включения)
  - Режим 3: автоматическое чередование быстрого и медленного режимов (желтый цвет кнопки включения)
  - Режим 4: термокомпресс, медленный (красный цвет кнопки включения)
- \* Во избежание ожогов в режиме термокомпресса металлическая массажная головка нагревается постепенно.**
- \* Снимите силиконовую насадку перед использованием режима термокомпресса.**
- Выключение**  
Во время работы удерживайте функциональную кнопку 2 секунды для выключения устройства.

Область  
красного света

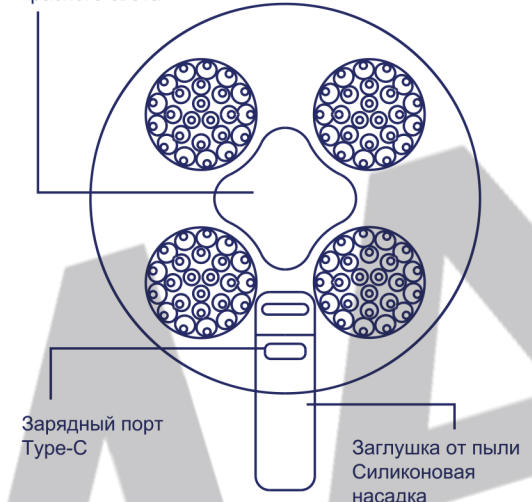

**ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ**

- Подключите кабель USB одним концом к зарядному порту устройства, другим — к сетевому адаптеру, затем включите адаптер в розетку.
- Во время зарядки индикатор горит красным, а после полной зарядки сменяется на зелёный.
- Не используйте массажер во время зарядки.
- Время полной зарядки составляет 2–3 часа. Одного заряда хватает на 4–5 сеансов продолжительностью по 10 минут каждый.

**ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА**

Во время работы красный индикатор начнет мигать при низком уровне заряда батареи.

**ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

При возникновении неисправностей во время работы выполните следующие проверки. Если неисправность устранить не удалось или работа устройства не восстановилась, отключите питание и обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта. Никогда не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ
Не включается	Проверьте, не разряжена ли батарея	Если да, своевременно зарядите
Слабый массажный эффект	Проверьте уровень заряда батареи	Если да, своевременно зарядите аккумулятор

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Номинальное зарядное напряжение: 5 В = 0,5 А
- Емкость аккумулятора: 1100 мАч
- Напряжение аккумулятора: 3,7 В
- Номинальное время работы: 10 минут
- Время зарядки: 2–3 часа
- Степень влагозащиты: IPX7

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Для обеспечения правильного и безопасного использования массажера внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации. Компания-производитель не несет ответственности за последствия, вызванные неправильным использованием устройства или несоблюдением инструкций.

1. Не используйте устройство во время управления транспортным средством.
2. Не используйте устройство, если в зоне предполагаемого массажа ранее проводились хирургические операции.
3. Не используйте устройство при наличии в зоне массажа любых повреждений или воспалительных состояний кожи: травм, отеков, воспалений, гематом.
4. Не используйте устройство при наличии сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе в анамнезе), острых заболеваний, кожных болезней, злокачественных опухолей или любых других острых патологических состояний.
5. Не используйте устройство при заболеваниях крови, склонности к кровотечениям, остеопорозе, болезнях мягких тканей, а также после перенесенных инсультов.
6. Не используйте устройство при нарушениях двигательной активности, общем недомогании, психическом дискомфорте или психических расстройствах. При необходимости использования устройства в указанных выше случаях предварительно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
7. Использование массажера противопоказано беременным и женщинам в период менструации.
8. Использование устройства запрещено детям младше 6 лет. Детям в возрасте от 6 до 12 лет допускается использовать устройство только под руководством и присмотром родителей или опекунов.
9. Данное устройство является бытовым электронным средством для оздоровительного ухода. Оно не предназначено для использования в качестве медицинского прибора, для постановки диагноза, лечения или в иных

- коммерческих целях.
10. Заряжайте устройство только кабелем из комплекта поставки и соблюдайте правила электробезопасности.
  11. Немедленно прекратите использование при возникновении любого дискомфорта во время процедуры.
  12. При длительном хранении подзаряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца для сохранения работоспособности аккумулятора.

**ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ**

Протрите поверхность влажной салфеткой и вытрите насухо хлопковой тканью. Перед чистой выключите устройство.

**ХРАНЕНИЕ**

При хранении более 3 месяцев извлеките устройство из упаковки и проверьте и зарядите его перед использованием. Не храните изделие вплотную к полу, стенам или потолку. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей и едких испарений.

**УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА**

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте продукт в соответствии с местным экологическим законодательством и предписаниями.

**Гарантийный талон**

**Изделие:** Аппарат Mezonica.  
**Гарантийный срок:** 12 месяцев (с момента приобретения)  
**Дата приобретения:** Указана в чеке товара.  
Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем кассового (товарного, электронного) чека и гарантийного талона. В случае наступления гарантийного случая, просьба обращаться: 108811 г. Москва 22-й км Киевского шоссе. ДВЛД 4 стр.2 корп.Г оф. 905Г или по номеру телефона 8 800 550-54-96

**УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
Изготовитель (продавец) оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам, в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных и неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших за собой повреждение изделия.

**Гарантия не распространяется:**  
На элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают: последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

**Гарантия не распространяется на изделия, вызванными:**  
Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации; Попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных, внутрь корпуса изделия; Воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия; Механическими воздействиями; Не квалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия; Повреждение электрических шнуров; Подключение в сеть с напряжением, отличным, от указанного в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации; Использование изделия в промышленных и/или коммерческих целях; Использование чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации; Использование нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей; Обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

**Доставка товара для возврата и обмена по заводскому браку до сервисного центра продавца осуществляется за счет покупателя.**